

## Laboratorio de Electromagnetismo y Óptica (ByG)

### TP N°1: Circuitos cc. Ley de Ohm

#### Objetivos

Determinación de la relación entre la corriente eléctrica y la diferencia de potencial aplicadas a diversos dispositivos eléctricos. Ley de Ohm. Determinación de resistencia en serie y en paralelo. Uso del multímetro.

#### Introducción

Se dice que un material es conductor cuando posee una gran cantidad de cargas libres (negativas, electrones). Entonces, así como una cañería puede llevar cierto caudal de agua, a través de un material conductor se puede mover un "caudal" de electrones, que llamaremos corriente ( $I$ ). Para que el agua circule por las cañerías de una casa es necesario aplicar cierta diferencia de potencial gravitatorio, por ejemplo poniendo el tanque arriba de la casa; de la misma forma, para que los electrones circulen es necesario aplicar cierta diferencia de potencial eléctrico ( $V$ ). En general, la analogía con las cañerías es buena para pensar a los circuitos eléctricos mientras no se tengan otras herramientas, aunque como toda analogía es limitada. En la práctica sucede al revés, y los circuitos eléctricos son utilizados para modelar una gran cantidad de flujos (como el sistema circulatorio o el sistema de irrigación en plantas). La corriente puede ser positiva o negativa según el sistema de referencia que se tome y el sentido de circulación de las cargas. La diferencia de potencial también puede cambiar de signo según el sistema de referencia.

Cada material o combinación de materiales reacciona distinto ante el paso de una corriente o la aplicación de una diferencia de potencial, y generan una relación entre la diferencia de potencial entre sus extremos y la corriente que pasa a través de él. Un caso particular de estas relaciones es la Ley de Ohm (ec. 1), que junto con la Ley de Hooke para los resortes o los materiales elásticos, es probablemente una de las leyes experimentales más utilizadas, y plantea justamente una relación lineal entre diferencia de potencial y corriente:

$$V = I \cdot R \quad (1)$$

donde  $R$  se denomina resistencia y depende del material. En general, la validez de esta ley depende fuertemente del material, es así que hay materiales que se llaman óhmicos o no óhmicos, según si siguen o no dicha relación. A su vez estos componentes del circuito pueden combinarse de distintas formas, generando otras relaciones sean también óhmicas o no dependiendo de los materiales utilizados.

A lo largo de esta practica les proponemos explorar la relación entre la diferencia de potencial y la corriente para distintos posibles componentes de un circuito, o una combinación de ellos.

## Actividades

Se quiere estudiar la relación funcional entre la corriente y el voltaje, a partir de una curva  $I - V$ . Arme un circuito simple que conecte una fuente continua de voltaje regulable y una resistencia. Empleando correctamente dos multímetros, registre la **corriente que circula por la resistencia y la diferencia de potencial entre sus extremos** para diferentes voltajes de la fuente. ¿Cómo conecta cada uno de estos multímetros? ¿por qué? (para ayuda vea el Apéndice al final de la guía). ¡Realice un esquema del circuito que empleará para medir en cada caso incluyendo a los dos multímetros!

Adquiera una serie de mediciones en un **rango amplio de voltaje** (desde valores negativos hasta valores positivos). Luego, si es necesario, seleccione las regiones que les resulten más interesantes y agregue más puntos para poder describir mejor el comportamiento del sistema en esas regiones.

### Para pensar:


¿Cómo lograr valores negativos de voltaje? ¿Qué ocurre si se conectan los cables a las distintas salidas de la fuente: -9V, TIERRA, +9V, VARIABLE (ver figura 1)? ¿Qué sucede si se invierten los cables de la fuente una vez que ya están midiendo o ya midieron?



**Figura 1:** Esquema representativo de una fuente de voltaje.

## Resistencias

Comenzar trabajando con un circuito compuesto por una fuente y una resistencia (figura 2). Recuerde realizar el esquema del circuito que arma para medir corriente y voltaje incluyendo multímetros.

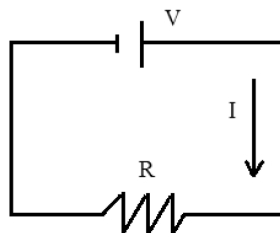

**Figura 2:** Esquema del circuito que se desea estudiar.

Grafique la relación voltaje - corriente. ¿Qué modelo propondría para ajustar los datos? ¿Se cumple la Ley de Ohm propuesta? ¿Esta ley vale en todo el rango de voltajes y corrientes que midieron? ¿Puede calcular el valor de la resistencia utilizada?

## Diodos y lamparitas

Repetir el procedimiento para un diodo y/o lamparita en vez de una resistencia. ¿Se cumple la Ley de Ohm propuesta? ¿Pueden generar un modelo (una ecuación que represente la relación entre las variables)? ¿Este modelo vale en todo el rango de voltajes y corrientes que midieron?

**Precaución:** No debe cortocircuitarse la fuente, por lo que si creemos que esto puede ocurrir o no sabemos que es lo que va a ocurrir, debemos colocar una resistencia en serie con la fuente (¿por qué?). PRESTAR ATENCIÓN EN CASO DE USAR UN DIODO.

## Resistencias en serie y en paralelo

Usando por lo menos 2 resistencias probar configuraciones de conexiones en serie y en paralelo. Mida el valor de resistencia de cada una de ellas individualmente, luego mida las resistencias de la configuración conectándolas en serie y en paralelo. Para cada configuración, compare los resultados obtenidos con las predicciones teóricas. En esta actividad, para medir la resistencia, se utilizará el multímetro en la función de medición de resistividad.

Repasar ANTES de la clase de laboratorio: resistencia equivalente para conexiones en serie y en paralelo!).

## Apéndices

### Fuente de Voltaje

Las fuentes de voltaje existentes en el laboratorio pueden funcionar tanto en un régimen continuo como en alterna (figura 1). Para esta práctica sólo se utilizará el modo continuo. Con la perilla que aparece en la figura 1 es posible regular la tensión que entrega la fuente.

### Diodo


Un **diodo** es un componente electrónico (típicamente semiconductor) que solamente permite el paso de la corriente en un único sentido, a través de sus terminales (ánodo y cátodo). Es decir, el diodo se comporta de dos formas diferentes según el sentido de la corriente: permite que la corriente fluya en una dirección (**polarización directa**), pero en la dirección opuesta, no permite fluir a la corriente, actuando como un aislante (**polarización inversa**)<sup>1</sup>. Existen distintos tipos de diodos, con diferentes características. Entre los semiconductores figuran por ejemplo, los láser diodos y los LED (diodos emisores de luz por sus siglas en inglés light-emitting diode).

### Lámpara incandescente

Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico (en general de tungsteno) mediante el paso de corriente eléctrica. Para evitar que el filamento se queme en contacto con el aire, se rodea con una ampolla de vidrio a la que se le ha hecho el vacío o se ha rellenado con un gas. Las lámparas incandescentes fueron la primera forma de generar luz a partir de la energía eléctrica. Su eficiencia es muy baja, ya que solo convierte en trabajo (luz visible) alrededor del 15% de la energía consumida, el resto de la energía se pierde en forma de calor<sup>2</sup>.

## Multímetro

Sirve para medir tanto corriente como voltaje (figura 3.a). En cada caso es necesario seleccionar el modo correcto (preguntar al docente), seleccionar la escala (pensar en cada caso qué escala utilizar y en base a eso cuál es el error de cada medición) y conectar correctamente los cables según vayan a medir corriente o voltaje.

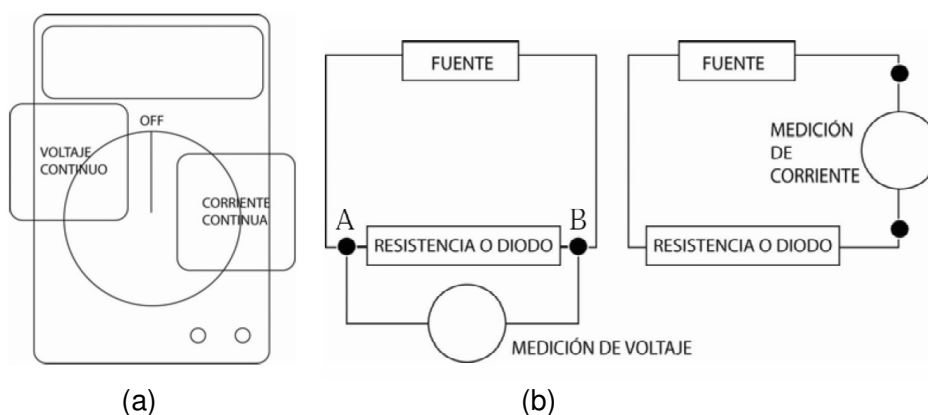

**Figura 3:** (a) Ejemplo de multímetro. (b) Configuraciones para conectar el multímetro como Voltímetro (izquierda) y Amperímetro (derecha).

### Modo de conexiones del Multímetro para realizar las mediciones de:

- **Voltaje (Voltímetro):** Se mide la diferencia de potencial entre dos puntos (A y B) del circuito que no necesariamente deben ser adyacentes ni cercanos. Para ello se debe conectar el multímetro "en paralelo" como indica la figura 3.b (izquierda). La resistencia interna de un voltímetro es muy grande de tal forma que la corriente que se desvía por esa rama es despreciable y la presencia del voltímetro no modifica el circuito. (¿Cómo sería un voltímetro ideal?)

Toda diferencia de potencial implica una medida entre dos puntos del circuito. Un caso particular es cuando uno de los puntos es el nivel de tensión de referencia es Tierra (GND o GROUND).

- **Corriente (Amperímetro):** se mide la corriente que pasa por una rama del circuito. Para ello se debe conectar el multímetro "en serie" como indica la figura 3.b (derecha). Con el fin de no modificar el circuito el amperímetro posee una resistencia interna muy pequeña, de tal manera que no hay una diferencia de potencial apreciable entre sus terminales.

**NOTA:** Una conexión incorrecta de un equipo puede causar cortocircuitos involuntarios. Los cortocircuitos pueden dañar el instrumental o dar lugar a medidas incorrectas porque el circuito ha sido modificado por la conexión del instrumental de medida. Verifique la conexión del circuito con el docente antes de encender la fuente de tensión.

## Referencias

<sup>†</sup> Guías de trabajos prácticos de Laboratorio 2 de alumnos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

<sup>1</sup> Fluke Programa de colaboración educativa de Fluke. <https://www.fluke.com/es-ar/>.

<sup>2</sup> Recursos docentes CITCEA. <https://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/lincan.html>

## Bibliografía

- *Física Vol.II -Campos y ondas* -M. Alonso y E. J. Finn, Fondo Educativo Interamericano Ed. Inglesa, Addison-Wesley, Reading Mass. (1967); Fondo Educativo Interamericano (1970).

- *Berkeley physics course -Volumen 2*, Electricidad y magnetismo, E. M. Purcell, Editorial Reverté, Barcelona (1969).