





Configurar la escala

- 1.Seleccionamos el ícono de la línea.
- 2.Luego vamos a Analyze>Set Scale



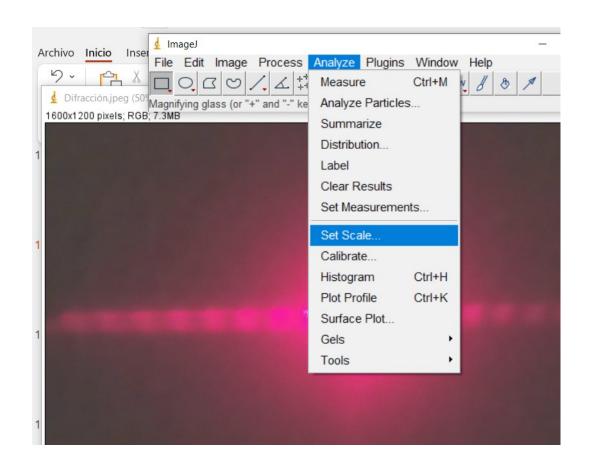


3. Si tenemos una hoja milimétrica o la pantalla milimétrica marcaremos 1 mm y obtendremos la distancia en pixeles.

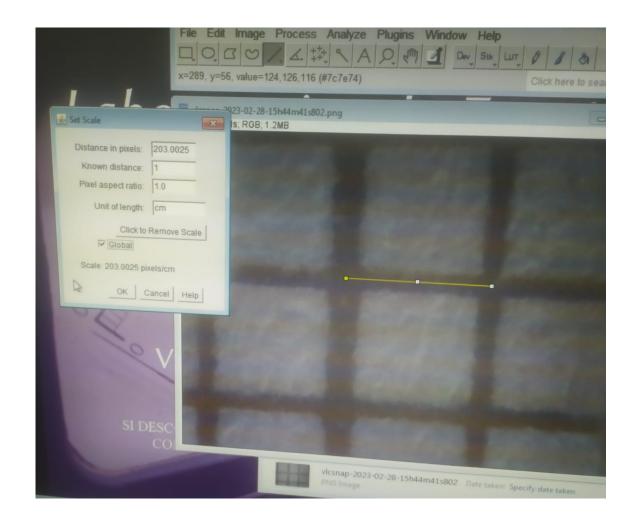



Para medir:


1. Selecciono esta opción para marcar la longitud que quiero medir.

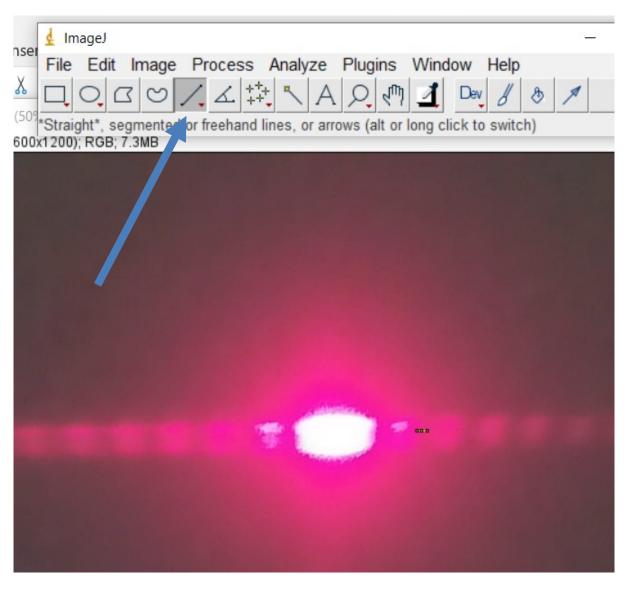




2. Para efectuar la medición una vez ya seleccionado el ícono de la línea.

Seleccionamos:
Analyze>Measure
O bien, Ctrl+M

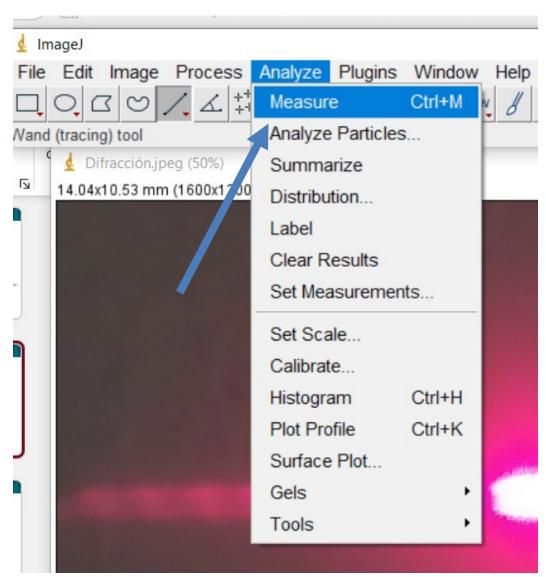



3. Se abre una ventana donde figura el valor de la medición, corresponderá a la columna "Length".

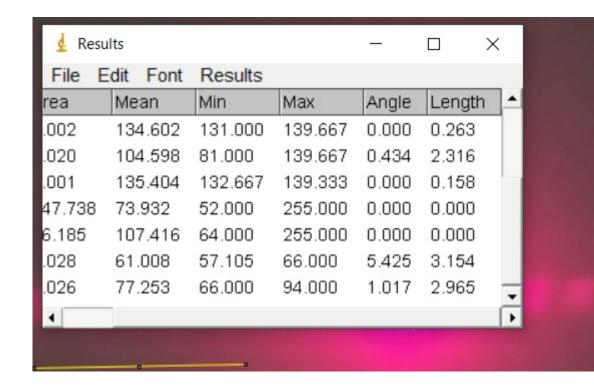


7/03/2023




1. Seleccionar región, en este caso se utilizó el icono para región rectangular

Analyze>Tools> ROI Manager

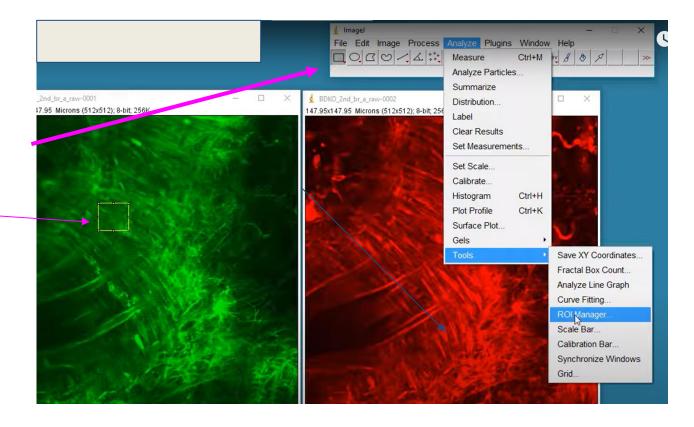




3. Marcar las regiones de interés y usar la opción *Rename* para caracterizarla con un nombre que les permita identificar cuál zona están midiendo.

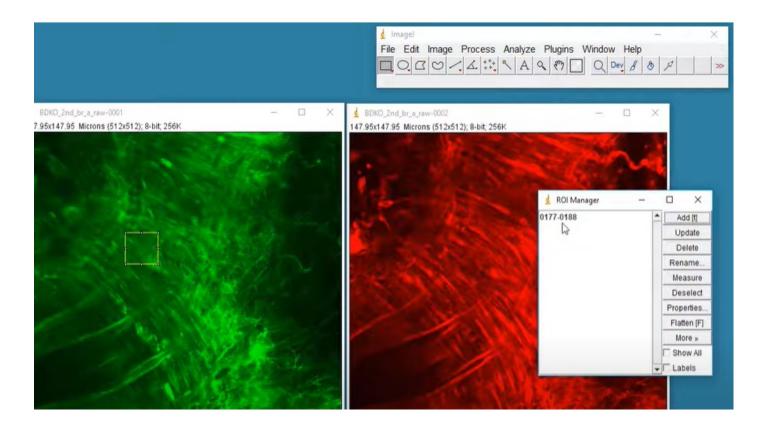



4. Analyze> Set Measurements

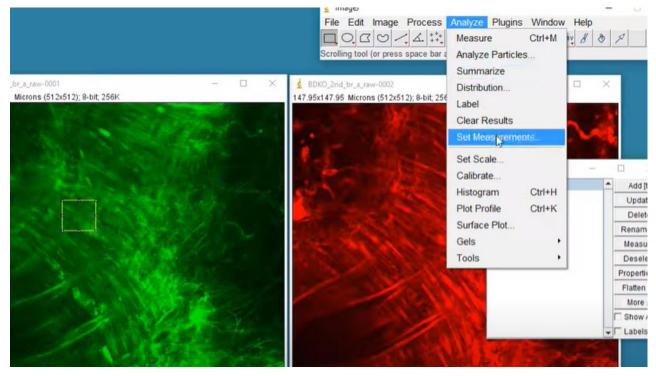



5. Selectionar Integrated density

